



# SDI RIVA STAR

## MODE D’EMPLOI (CAPSULES)

## F R A N C A I S

Riva Star est une nouvelle génération de désensibilisator qui soulage immédiatement la sensibilité dentaire.

**INDICATION D’UTILISATION:** Désensibilisation de l’hypersensibilité de la zone cervicale de la dent.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser sur des patients qui subissent un traitement pour la glande thyroïde, qui ont eu des allergies aux produits chimiques tels que l’argent, le fluorure, le potassium, l’iode, l’ammoniac et les méthacrylates.

Remarque : en cas de doute, veuillez consulter un médecin ou unallergologue avant d'utiliser le produit

**PROCÉDURE:**

- Mettre une pâte de prophylaxie sans fluor dans une tasse en plastique, nettoyer la/les dent(s) à traiter et les dents voisines.
- Évaluer l'état des dents. Seules les dents avec une dentine et un émail sans doivent être traitées.
- Isoler la zone à traiter avec des rouleaux de coton.
- Sécher les dents à traiter et les tissus gingivaux voisins.
- Appliquer une légère quantité de barrière gingivale sur les tissus, en chevauchant légèrement la dent (<1mm) et dans les espaces interproximaux. Alternativement, un isolement absolu peut être utilisé
- Protégez tous les tissus et les lèvres gingivaux exposés avec de la vaseline et du beurre de cacao en prenant soin de ne pas contaminer le site de traitement.
- Riva Star Étape 1 :** à l'aide de la brosse argent fournie, percer le film de la capsule couleur argent et appliquer soigneusement la solution uniquement sur la zone à traiter.
- Riva Star Étape 2 :** immédiatement après, utiliser la brosse verte fournie, percer à travers le film de la capsule verte et appliquer une bonne quantité de la solution sur la zone à traiter. Appliquer la même solution sur toutes les autres surfaces de la dent jusqu'à ce que le précipité blanc crèmeux devienne clair (si ce précipité ne devient pas clair, des taches peuvent en résulter). Remarque : la surface traitée apparaît initialement d'un blanc crèmeux, continuez à appliquer la solution de la capsule verte jusqu'à ce qu'elle devienne claire.
- Sécher, retirer la barrière gingivale.
- Retirez tous les matériaux de protection / d'isolation utilisés dans la bouche.
- Jeter les capsules et les pinceaux usagés conformément à la réglementation locale.

**DOSAGE:**

- Chaque capsule Riva Star Step 1 et Step 2 peut traiter jusqu'à 5 dents par patient.
- Limite d’une (1) capsule Étape 1 et d’une (1) Capsule Étape 2 par visite. Si nécessaire, une seconde application de Riva Star peut être administrée après une semaine.

**PRÉCAUTIONS:**

- Uniquement destiné à un usage professionnel.
- En raison d’une coloration potentielle, il est recommandé de ne pas traiter les dents antérieures.
- Ce produit peut tacher les dents s'il n'est pas utilisé correctement. Le patient doit être informé de ceci avant de l'utiliser.
- Lorsque le produit est utilisé comme désensibilisant appliquer une barrière gingivale avant l'étape 1 afin d'éviter de brûler le tissu mou.
- Éviter le contact de la solution de la capsule en argent (Étape 1) avec le tissu mou, les yeux et la peau. En cas de contact accidentel, reportez-vous à la section Premiers soins ci-dessous.
- Éviter le contact de la solution de la capsule verte (Étape 2) avec les yeux.
- Ne pas désensibiliser les dents avec des caries, sauf si un verre ionomère (tel que Riva SC de SDI) est utilisé pour recouvrir la zone traitée.
- Laisser hors de portée des enfants.
- Ne pas ingérer.
- La solution de la capsule argent (Étape 1) tachera (voir « Traiter les taches »).
- Porter des gants et une protection oculaire lors de la manipulation.
- Usage unique.
- Ne pas utiliser après la date d’expiration.
- Avertissement : La loi limite la vente et l'utilisation de ce produit par les dentistes uniquement.
- La solution de la capsule argent (Étape 1) contient 0,06 g / mL d'ions fluorure.
- Ne pas utiliser avec un matériau composite de restauration à base de résine.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou contacter un représentant SDI.

**RANGEMENT ET MANIPULATION :**

- Ne pas percer le film de la capsule argent ou de la capsule verte avant que le produit ne soit prêt à être utilisé.
- Ranger dans un endroit frais et sombre à des températures entre 2° et 8°C (35° - 45°F).
- Utiliser à des températures ambiantes entre 20° et 25°C (68° - 77°F).

**PREMIERS SECOURS :**

- Les yeux (contact) :** maintenir les paupières ouvertes et rincer l’œil abondamment à l’eau. Continuer à rincer jusqu'à ce qu'un Centre d'information antipoison ou un médecin vous dise d'arrêter, ou pendant au moins 15 minutes.
- Peau / tissus mous buccaux (contact):** Enlever les vêtements contaminés et rincer à l'eau courante (si une escarre se forme, elle devrait disparaître dans les 24 à 48 heures). Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- Ingestion :** inattendue en raison du volume de la dose. Si une personne est concernée, NE PAS provoquer de vomissement. Donner un verre de lait ou d'eau. Pour obtenir des conseils, contactez un centre d'information sur les poisons ou un médecin.
- Inhalation :** inattendue en raison du volume de la dose. Si une personne est concernée, la faire sortir de la zone contaminée.

**TRAITER LES TACHES :**


- La peau :** appliquer la solution de la capsule verte avec un frottant douxment. La tache disparaît lentement. (Si rien n'est fait la tache disparaîtra progressivement après quelques jours).
- Les vêtements :** faire tremper dans du Napisan® (ou un autre détartrant pour tissu) toute la nuit et laver normalement.
- Surface dures :** appliquer immédiatement de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) puis essuyer avec de l'eau. Pour les taches tenaces, imbiber une serviette en papier d'eau de javel et placer sur la zone concernée. Laisser toute la nuit et essuyer avec de l'eau.

Napisan® n'est pas une marque déposée de SDI Limited.

**COLISAGE :**

- Contenu des kits
- 10 x Riva Star Étape 1 (Argent dose unique)
- 10 x Riva Star Étape 2 (Vert dose unique)
- 2 x barrière gingivale
- accessoires

Brevets américains accordés.

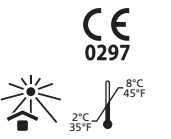

Dernière Révision: 07-2019

# SDI RIVA STAR

## ISTRUZIONI D’USO (CAPSULE)

## I T A L I A N O

Riva Star è un desensibilizzante di nuova generazione che allevia immediatamente la sensibilità dei denti.

**INDICAZIONI D’USO:** Desensibilizzazione delle aree cervicali ipersensibili.

**CONTROINDICAZIONI**

NON utilizzare su pazienti sottoposti a terapia della ghiandola tiroidea, che presentano anamnesi di allergie chimiche, per esempio argento, fluoro, potassio, iodio, ammoniac e metacrilati.
Nota: In caso di dubbio, consultare un medico o uno specialista allergologo prima dell'uso.

**PROCEDURA:**

- Utilizzando una pasta per proflassi senza fluoro su una coppetta in gomma, pulire il dente / denti da trattare e denti adiacenti.
- Valutare le condizioni dei denti. Trattare solo i denti con dentina e smalto sani.
- Isolare la zona da trattare con rulli di cotone.
- Asciugare i denti da trattare e i tessuti gengivali adiacenti.
- Applicare una piccola quantità di Gingival Barrier sui tessuti, sovrapponendo leggermente il dente (<1 mm) e gli spazi interdentali. In alternativa, una diga di gomma può essere utilizzata per l'isolamento
- Proteggere i tessuti e le labbra gengivali esposti con vaselina / burro di cacao facendo attenzione a non contaminare il sito di trattamento.
- Riva Star Fase 1 :** Utilizzando il brush colore argento fornito , forare la membrana della capsula argento e applicare con cura la soluzione solo sul sito di trattamento .
- Riva Star Fase 2 :** Subito dopo , utilizzando il brush verde disponibile , forare la membrana della capsula verde e applicare un’abbondante quantità della soluzione sul sito di trattamento. Applicare la stessa soluzione sulle altre superfici dentali fino a quando il precipitato bianco cremoso si schiarisce (se questo precipitato non diventa trasparente, possono comparire macchie). Nota: La superficie trattata appare inizialmente bianca crema, continuare ad applicare la soluzione della capsula verde finché non diventa trasparente.
- Asciugare, e rimuovere la Gingival Barrier.
- Rimuovere tutti i materiali di protezione / isolamento usati in bocca.
- Eliminare le capsule e le spazzole usate in conformità alle normative locali.

**DOSAGGIO:**

- Ogni capsula di Riva Star Step 1 e Step 2 può trattare fino a 5 denti per paziente.
- Limite di una (1) Fase 1 e una (1) Fase 2 capsula per visita. Se necessario, una seconda applicazione di Riva Star può essere somministrata dopo 1 settimana.

**PRECAUZIONI:**

- Solo per uso professionale.
- A causa della potenziale colorazione, si raccomanda di non trattare i denti anteriori.
- Questo materiale potrebbe macchiare i denti se usato in modo errato. Informare il paziente in tal senso prima del suo utilizzo.
- Se utilizzato come desensibilizzante, applicare la barriera gengivale prima della Fase 1 per evitare di bruciare i tessuti molli.
- Evitare il contatto della soluzione della capsula argento (Fase 1) con i tessuti orali, gli occhi e la cute. Se si verifica un contatto accidentale, fare riferimento a Primo soccorso di seguito.
- Evitare il contatto della soluzione della capsula verde (Fase 2) con gli occhi.
- Non desensibilizzare denti che presentano lesioni cariose, a meno che non si utilizzi un vetroionomero per la ricostruzione dopo il trattamento.
- Tenere fuori della portata dei bambini.
- Non ingerire.
- La soluzione contenuta nella capsula argento (Fase 1) causa macchie (ved. "Gestione delle macchie").
- Indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione.
- Solo monouso.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Attenzione: La legge consente la vendita di questo dispositivo solo ai dentisti.
- La soluzione nella capsula argento (Fase 1) contiene 0,06g / ml di ioni di fluoro.
- Le schede di sicurezza (MSDS) sono disponibili sul sito [www.sdi.com](http://www.sdi.com). au oppure contattando il rappresentante SDI locale.

**STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE:**

- Non forare la membrana della capsula argento o della capsula verde fino al momento dell'uso.
- Conservare in un luogo fresco e buio a temperature comprese tra 2° e 8°C (35° - 45°F).
- Utilizzare a temperatura ambiente tra 20° e 25°C (68° - 77°F).

**PRIMO SOCCORSO:**

- Occhi (contatto):** SOLLERARE le palpebre e sciacquare gli occhi continuamente con acqua corrente. Continuare a sciacquare per il tempo consigliato da un Centro Antiveleni o da un medico, o per almeno 15 minuti.
- Pelle / tessuto molle orale (contatto):** Rimuovere gli indumenti contaminati, sciacquare l'area con acqua corrente (nel caso si formi un'escara, questa dovrebbe scomparire entro 24-48 ore). Consultare un medico se i sintomi persistono.
- Ingestione:** Non prevista a causa del volume della dose. In caso di ingestione, NON indurre il vomito. Somministrare un bicchiere di latte o acqua. Per consigli contattare un centro informazioni sui veleni o un medico.
- Inalazione:** Non prevista a causa del volume della dose. In caso di inalazione, rimuovere dalla zona contaminata.

**GESTIONE DELLE MACCHIE:**

- Pelle:** Applicare la soluzione della capsula verde con uno sfregamento delicato. La macchia scomparirà lentamente. (Se non si interviene, la macchia scomparirà gradualmente dopo pochi giorni).
- Abbigliamento:** Mettere in ammollo nel Napisan® (o in un altro smacchiatore per tessuti) per tutta la notte e lavare come al solito.
- Superfici dure:** Applicare immediatamente candeggina (ipoclorito di sodio), poi pulire con acqua. In caso di macchie resistenti, saturare un tovagliolo di carta con candeggina e applicarlo sull'area interessata. Lasciare agire per tutta la notte e pulire con acqua.

Napisan® non è un marchio registrato di SDI Limited.

**CONFEZIONAMENTO:**

- Kit contenenti
- 10 Riva Star Fase 1 (dose singola argento)
- 10 Riva Star Fase 2 (dose singola verde)
- 2 Gingival Barrier
- accessori

Brevetti statunitensi concessi.

# SDI RIVA STAR

## INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA (KAPSUŁKI)

## P O L S K I

Riva Star to nowej generacji środek znoszący nadwrażliwość o natychmiastowym działaniu.

**WSKAZANIA:** Znoszenie nadwrażliwości szyjek zębowych.

**PRZECIWSKAZANIA**

Nie stosować u pacjentów przechodzących leczenie tarczycy oraz pacjentów, u których stwierdzono alergię na takie substancje chemiczne jak srebro, fluorki, potas, jod, amoniak i metakrylany.
Uwaga: w razie wątpliwości przed użyciem skonsultować się z lekarzem lub specjalistą alergologiem.

**STOSOWANIE:**

- Stosując pastę profilaktyczną umieszczoną w gumowej wkładce, wyszczyść zęby poddawane zabiegowi oraz zęby przylegające.
- Ocenić kondycję zębów. Zabiegowi można poddawać wyłącznie zęby posiadające zdrową zębinę i szkliwo.
- Odzisolować właściwy obszar za pomocą bawełnianych walczków stomatologicznych.
- Osuszyć zęby podlegające zabiegowi oraz przyległe tkanki dziąsł.
- Nanieść na tkanki niewielką ilość preparatu Gingival Barrier, częściowo pokrywając ząb (<1 mm) i przestrzenie międzyzębowe. Alternatywnie, do izolacji można użyć koferdamu.
- Zabezpieczyć odsłonięte tkanki i wargi działową wazeliną / masłem kakaowym, uważając, aby nie zanieczyścić miejsca zabiegu.
- Riva Star Krok 1:** Za pomocą znajdującego się w komplecie srebrnego pędzelka wykonać otwór w powłoczce srebrnej kapsułki i ostrożnie nanieść preparat wyłącznie na miejsce poddawane zabiegowi.
- Riva Star Krok 2:** Bezpośrednio po wykonaniu tej czynności za pomocą znajdującego się w komplecie zielonego pędzelka wykonać otwór w powłoczce zielonej kapsułki i nanieść większą ilość preparatu na miejsce poddawane zabiegowi. Nanieść preparat na wszystkie powierzchnie zębów, aż kremowo-białe osady stanie się klarowny (jesli ten osad nie zmieni jasnego zabarwienia). Uwaga: powierzchnia poddawana zabiegowi pierwotnie ma kolor kremowo-biały. Preparat z zielonej kapsułki należy nanosić do czasu, kiedy stanie się ona przrzysta.
- Osuszyć zęby wacikiem i usunąć żel do ochrony dziąsł.
- Usuń wszystkie materiały ochronne / izolacyjne używane w ustach.
- Wyrzucić zużyte kapsułki i pędzleki zgodnie z lokalnymi przepisami.

**DAWKOWANIE:**

- Każda kapsułka Riva Star krok 1 i krok 2 może leczyć do 5 zębów na pacjenta.
- Para kapsulek (srebrna i zielona) jest dedykowana dla jednego pacjenta na jednej wizycie. W razie potrzeby można ponownie zastosować Riva Star po 1 tygodniu.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

- Wyłącznie do użyciu przez specjalistę.
- Ze względu na potencjalną zabarwienie nie zaleca się stosowania na zębach przednich.
- W przypadku niewłaściwego stosowania wyrób ten może powodować zabarwienie zębów. O fakcie tym należy poinformować pacjenta przed zastosowaniem preparatu.
- W przypadku stosowania wyrobu jako środka znoszącego nadwrażliwość, przed wykonaniem kroku 1 należy zastosować preparat Gingival Barrier w celu ochrony tkanek miękkich przed poparzeniem.
- Unikać kontaktu preparatu ze srebrnej kapsułki (krok 1) z tkanką jamy ustnej, oczami i skórą. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, patrz Pierwsza pomoc poniżej.
- Unikać kontaktu z oczami preparatu z zielonej kapsułki (krok 2).
- Nie stosować w celu zniesienia nadwrażliwości zębów próchnicznych, jeżeli miejsce poddawane zabiegowi nie zostanie pokryte cementem szkło-ionomerowym.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie polykać preparatu.
- Preparat ze srebrnej kapsułki (krok 1) barwi zęby (patrz punkt „Postępowanie w przypadku zabarwienia”).
- W czasie stosowania preparatu nosić krawieczi i środki ochrony oczu.
- Produkt przeznaczony do jednorazowego użyciu.
- Nie stosować po upływie daty ważności.
- Uwaga: przepisy lokalne zezwalają na sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez dentystę lub na jego zlecenie.
- Preparat w srebrnej kapsułce (krok 1) zawiera 0,06 g/ml jonów fluorokowych.
- Wyrób nie jest przeznaczony do stosowania z kompozytowymi materiałami do uzupełnień na bazy żywic.
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna pod adresem [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) lub u przedstawiciela SDI.

**PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE:**

- Srebrną i zieloną kapsułkę otwierać bezpośrednio przed wykorzystaniem preparatu.
- Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu w temperaturze od 2°C do 8°C.
- Stosować w temperaturze pokojowej od 20°C do 25°C.

**PIERWSZA POMOC:**

- Kontakt z oczami:** przytrzymać otwartą powiekę i przemywać oko bieżącą wodą. Przemywać nieprzerwanie przez 15 minut albo do czasu uzyskania oddmiennego zalecenia z Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej lub od lekarza.
- Skóra / tkanka miękka w jamie ustnej (kontakt):** Zdjąć zanieczyszczoną odzież, splukać obszar bieżącą wodą (w przypadku uformowania strupów, powinno to zniknąć w ciągu 24-48 godzin). Skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się.
- Spóźnicze:** mało prawdopodobne ze względu na objętość kapsułki. Jeżeli dojdzie do spożycia, NIE wylowywać wymiotów. Wypić szklankę wody lub mleka. W celu uzyskania porady skontaktuj się z Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej o Truciznach lub lekarzem.
- Wdychanie:** mało prawdopodobne ze względu na objętość kapsułki. Jeżeli do niego dojdzie, opuścić szkazeńno miejsce.


**POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZABARWIENIA:**

- Skóra:** lekko wcierając (należy preparat z zielonej kapsułki. Zabarwienie powoli zniknie (jeżeli nie zostanie podjęte żadne działanie, namoczyć na noc w odplamiacz i wyprać.).
- Odzież:** namoczyć na noc w środku Napisan® (lub innym odplamiaczu do tkanin) i wyprać w zwykły sposób.
- Twarde powierzchnie:** bezwzględnie zastosować wybielacz domowy (podchloryn sodu), a następnie zetrzeć na mokro. W przypadku uporczywych plam nasączyć chusteczkę domowym wybielaczem i umieszczyć ją na zabrudzonym miejscu. Pozostawić na noc, a następnie zetrzeć na mokro.

**OPAKOWANIE:**

- Zestaw zawiera
- 10 x Riva Star (pojedyncza dawka w srebrnej kapsulce) — krok 1
- 10 x Riva Star (pojedyncza dawka w zielonej kapsulce) — krok 2
- 2 x preparat Gingival Barrier
- akcesoria

Wyrób opatentowany w USA.

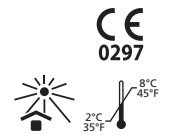

Ultima Revisione: 07-2019

# SDI RIVA STAR

## GEBRUIKSAANWIJZING (CAPSULES)

## D U T C H

Riva Star is een nieuwe generatie desensibilisator die onmiddellijk gevoelige tanden verlicht.

**INDICATIES VOOR GEBRUIK:** Desensibiliseren van cervicale tandovergevoeligheid.

**CONTRA-INDICATIES**

Niet gebruiken bij patiënten die een schildkliertherapie volgen, die een geschiedenis hebben van chemische allergieën zoals zilver, fluoride, kalium, jodium, ammoniak en methacrylaten.
Opmerking: In geval van twijfel, raadpleeg dan een arts of een allergiespecialist vóór gebruik.

**PROCEDURE:**

- Gebruik van een niet-fluoride profylaxe pasta in een rubberen beker reinig de te behandelen tand(tanden) en aangrenzende tanden.
- Beoordeel conditie van tanden. Alleen tanden met gezond dentine en glazuur moeten worden behandeld.
- Isoler te behandelen gebied met wattenrollen.
- Droog te behandelen tanden en aangrenzende tandvleesweefsels .
- Breng een kleine hoeveelheid tandvleesbarrière aan op de weefsels, enigszins de tand (< 1mm) en inter-proximale ruimten overlappend. Als alternatief kan een rubberen dam worden gebruikt voor isolatie
- Bescherm eventueel blootliggend tandvlees en lippen met vaseline / cacaboter en zorg ervoor dat de behandelingsplaats niet wordt verontreinigd.
- Riva Star Stap 1:** Met behulp van de meegeleverde zilveren penseel door de folie van de zilveren capsule prikken en de oplossing zorgvuldig aanbrengen alleen op de te behandelen plaats.
- Riva Star Stap 2:** Direct daarna, opbreng groene meegeleverde borstel, prik door de folie van de groene capsule en breng een royale hoeveelheid van de oplossing aan op de te behandelen plaats. Breng dezelfde oplossing aan op elk ander otadat het romige witte neerslag helder wordt (als dit precipitaat niet helder wordt, kan dit vlekken veroorzaken). Opmerking: Behandelingsoppervlak verschiint aanvankelijk romig wit, blijft oplossing van groene capsule aanbrengen totdat het helder wordt.
- Drop droog, verwijder tandvleesbarrière.
- Verwijder alle beschermende / isolatiematerialen die in de mond worden gebruikt.
- Gooi gebruikte capsules en borstels weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

**DOSERING:**

- Elke Riva Star Step 1 en Step 2 capsule kan tot 5 tanden per patiënt behandelen.
- Limiet van één (1) Stap 1 en één (1) Stap 2 capsule per bezoek. Indien nodig kan een tweede toediening van Riva Star na 1 week worden toegediend

**VOORZORGSMAATREGELEN:**

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Vanwege mogelijke verkleuring is het aanbevolen dat de voorste tanden niet worden behandeld.
- Dit materiaal kan vlekken op tanden veroorzaken bij verkeerd gebruik. Patiënt moet worden geïnformeerd voorafgaand aan het gebruik.
- BiJ gebruik als desensibilisator moet tandvleesbarrière worden toegepast voordat stap 1 plaats gaat vinden om zacht weefsel brandwonden te voorkomen.
- Vermijd contact van de oplossing van zilveren capsule (stap 1) met slijmvlies, de ogen en de huid. Als er per ongeluk contact is, raadpleeg dan Eerste hulp hieronder
- Vermijd contact van de oplossing van groene capsule (stap 2) met de ogen.
- Geen tanden met cariës desensibiliseren, tenzij een glasionomeer wordt gebruikt ter dekking op de plaats van behandeling.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet innemen.
- Oplossing van zilveren capsule (stap 1 ) vlekt ( zie "Behandelen van vlekken" ).
- Draag handschoenen en oogbescherming bij het hanteren.
- Ennmalig gebruik.
- Niet gebruiken na vervaldatum.
- Let op: conform federale wetgeving mag dit product uitsluitend door of in opdracht van een tandarts worden gekocht.
- Oplossing van zilveren capsule (stap 1) bevat 0,06 g / mL fluoride-ionen.
- Niet te gebruiken met composiet restauratiemateriaal op harsbasis.
- VIB is beschikbaar op [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) of neem contact op uw SDI vertegenwoordiger.

**OPSLAG EN BEHANDELING:**

- Folie van zilver capsule of groene capsule niet doorboren totdat het klaar voor gebruik is.
- Bewaor op een koele, donkere plaats bij temperaturen tussen 2° en 8° C (35°- 45° F).
- Gebruik bij kamertemperatuur tussen 20 ° en 25 ° C (68 ° - 77 ° F).

**EERSTE HULP:**

- Ogen (contact):** Houd de oogleden uit elkaar en spoel continue met stromend water. Blijf spoelen tot een Vergiftigingen Informatie Centrum (Australië, 131 126) of een arts, het advies geeft te stoppen, of gedurende ten minste 15 minuten.
- Huid / oraal zacht weefsel (contact):** Verwijder besmette kleding, spoel het gebied af met stromend water (in het geval dat een korst gevormd wordt, zou dit binnen 24-48 uur moeten verdwijnen). Zoek medische hulp als de symptomen aanhouden.
- Inslikken:** Niet verwacht door dosisvolume. Indien last hiervan, GEEN braken opwekken. Geef een glas melk of water. Neem voor advies contact op met een vergiftigingencentrum of een arts.
- Inademing:** Niet verwacht door dosisvolume. Indien last hiervan, verwijderden uit verontreinigde omgeving.

**BEHANDELEN VAN VLEKKEN:**


- Huid:** Breng de oplossing uit groene capsule aan met zacht wrijven. Vlek zal langzaam verdwijnen. (Als er niets wordt gedaan zal de vlek geleidelijk aan verdwijnen na een paar dagen).
- Kleding:** Week een nacht in Napisan® (of andere vlekkenverwijderaar voor stof) en normaal wassen.
- Harde oppervlakken:** Breng onmiddellijk bleekwater (natriumhypochloriet) daarna afvegen met water. Voor hardnekkige vlekken, verzadig een papieren servet met bleekwater en plaats over getroffen gebied. Een nacht laten staan en dwielen met water.

Napisan® is geen geregistreerde handelsmerk van SDI Limited.


**VERPAKKING:**

- Kits met
- 10 x Riva Star Stap 1 (Zilver enkele dosis)
- 10 x Riva Star Stap 2 (Groen enkele dosis)
- 2 x tandvleesbarrière
- accessoires

Amerikaans octrooi toegekend.

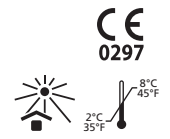

Ostatnia Aktualizacja: 07-2019

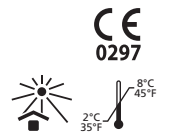

Laatst herziening: 07-2019